

# MOTomed gracile.12

## Entraîneur jambes pour enfants

Le MOTomed gracile12 est un entraîneur thérapeutique motorisé (passif, actif, actif aidé) conçu pour les enfants, à partir de 3 ans, en situation de handicap. L'installation des patients est facilitée par un nouvel ajustement en hauteur de l'entraîneur jambes. Avec sa vitesse de rotation jusqu'à 60tr/ min, il offre la possibilité d'accéder à des d'entraînements spécifiques.



**REF : 594.003**

### Utilisé par tous :

- Hémiplégie
- Lésions cérébrales
- Troubles musculaires
- Paralysie spasmodique
- BPCO
- Orthopédie
- Oncologie
- Diabète de type 2
- Démence
- Hypertension artérielle
- Trouble de la circulation
- Paraplégiques
- Enfants à partir de 3 ans

### Objectifs de la thérapie :



Renforcement musculaire



Maintien de la mobilité



Réduire les spasmes



Stimuler le système cardiovasculaire



Lutter contre la fatigue



Améliorer le bien-être général

### Équipements de série :



Semelles de sécurité en mousse (la paire, manivelles incluses)




Guides jambes avec appuis pour les mollets en mousse



Programmes d'entraînements & Jeux



Assistance à l'accès

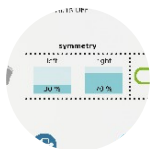

Symétrie membre inférieurs

## Équipements :

- Semelles de sécurité et guides jambes pour enfants avec appuis pour les mollets.
- Ecart étroit des semelles de 12cm.
- Structure entièrement métallique stable, de qualité et résistante.
- Grand écran intuitif (5,7").
- Ajustement en hauteur du pédalier de 26cm à 46cm.
- Ajustement du rayon de pédalage en 2 positions (3,5 cm ou 7 cm).
- Structure de l'appareil adapté aux nouvelles normes de désinfection européenne.
- Facilement transportable avec de grandes roues de transport (Ø 13 cm).
- Interface USB
- Petit pied à ressortir.
- Couleur : bleu/blanc/chrome.

## Fonctions :

- Entraînement passif, assisté et actif.
- Aide électronique d'accès.
- Alternance de l'entraînement des jambes.
- Vitesse de rotation passive de 1 à 60 tr/min.
- Résistance de freinage de 0 à 20 (active).
- Niveaux de puissance moteur de 1 à 10 (passif).
- Préréglage de la durée du traitement de 0 à 120 minutes.
- Programmes de Protection des mouvements et d'assouplissement des spasmes.
- Arrêt de sécurité.
- Démarrage et arrêt en douceur du mouvement.
- Programmes de thérapie et de motivation.
- Feedback détaillé pendant et après l'entraînement.
- Entraînement symétrique
- Paramètres d'entraînement préconfigurables.
- Jeux.
- Logiciel adapté aux enfants.
- Choix de la langue.

## Caractéristiques techniques :


Dimensions (LxlxH) :	68-85 x 55 x 76-106cm
Poids :	25 kgs
Poid max. de l'utilisateur:	90 kgs
Diagonale de l'écran :	5,7" / 14,5 cm
Classification :	IIa selon directive MDD 93/42/ EEC / MDR (EU) 2017/745
Tension secteur	100 -240 V max. 120 VA, fréquence secteur : 47-63 Hz, Classe de protection : II / Type BF

## Accessoires fréquemment utilisés :




170.100

Guides Jambes  
plastifiés pédiatriques

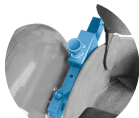

588.020

Ajustement exact du  
rayon de pédalage

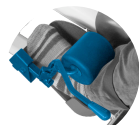

598.000

Fixations rapides  
pour pieds



100.020

Sécurité  
anti-basculement  
du fauteuil



152.120

Semelles de sécurité  
plastifiées pédiatriques



587.100

Petit pied plat

## Produit complémentaire pouvant être associé au MOTomed :



**Chaise Vela**  
Chaise de thérapie

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter :



☎ 02 23 45 04 22

🌐 [www.mobilefrance.fr](http://www.mobilefrance.fr)

✉ [contact@mobilefrance.fr](mailto:contact@mobilefrance.fr)